

歯科用



LION

DENT. e-floss

はじめての方にも薦めやすい
ロールタイプフロス登場!

Expanding
Effective
Easy
Essential
Economical
Enjoyable
Everyday




唾液でスポンジ状に膨らむ
エキспанディングフロスなので
歯面に沿わせやすく、歯肉にソフト。



唾液でスポンジ状に膨らむエキスパンディング フロス*を採用


- ◎歯面に沿わせやすく歯肉にソフト
初心者の方でも安心して歯肉に触れる歯頸部や歯肉縁下のフロッシングができます。
- ◎効率的にフロッシング
独自の構造で、広い面積のフロッシングが効率的、効果的にプラーク除去ができます。
- ◎フロスを巻く指にもソフトな感触
初心者の嫌がる指の痛みがありません。

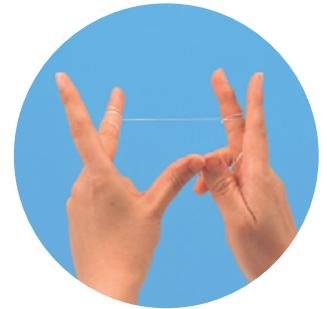

①唾液に触れるとフロスがスポンジ状に



②フロスを両手で引けば、通常のフロスの太さに

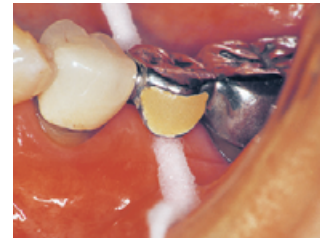

③ボンテックの下部のフロッシングにフロスの太さに

携帯に便利なケースを採用

- ◎卵形のやさしい曲線で構成されたケースデザイン
- ◎フロスの減り具合が一目で分かる半透明ケース
- ◎ケースはピンク・オレンジ・ブルー・クリアの4色

使用後に爽快感の残るソフトなミントフレーバー

患者様にすすめやすい価格設定

- ◎メーカー希望患者様向け価格
380円/40m

～*エキスパンディング フロスの特性～

挿入時

「水溶性ワックス」で滑りやすく、スムーズに操作できます。


歯間部に入る

唾液に触れる

「水溶性ワックス」が溶けだします。


「3次元ループ構造」でスポンジ状に膨らみます。直径20μmのフロスを織り込んでいるため、使用時に唾液に触れると膨らみ、直径が約4倍のスポンジ状になります。

『3次元ループ構造』

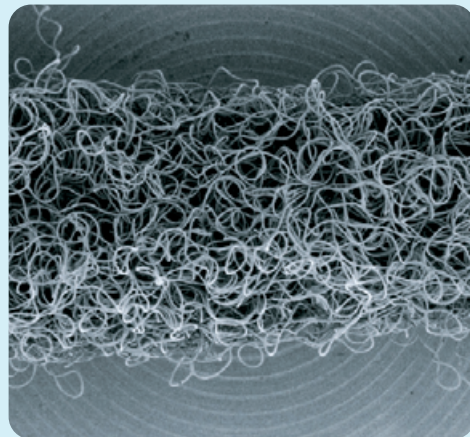



走査型電子顕微鏡像

使用前

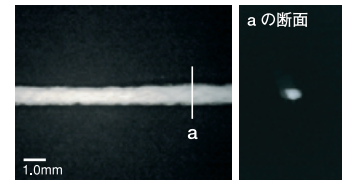

膨潤

唾液に触れるとフロスが膨れてスポンジ状に

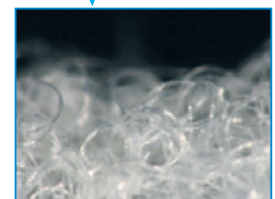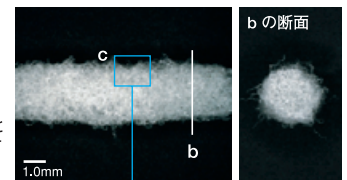

cの拡大写真



水溶性ワックス：食品グレードのポリエチレングリコールを使用しています。ポリエチレングリコールはFAO/WHO[®] 合同食品添加物専門家委員会の評価で食品添加物として安全性が確認されています。また、口紅や歯磨剤、洗口剤などに使われています。 ☆FAO/WHO:国際連合食糧機関/世界保健機構

材質	フロス束		
	フィラメント数	太さ	強度
ナイロン	288本	936dtex* 膨潤前：約0.3-0.4mm×1.0mm 膨潤後：約直径2.0mm	36ニュートン

*dtex:デンテックス。ISO(国際標準化機構)で規定された糸の太さの単位で、繊維の断面が円形ではないため直径で太さを表せないために、長さ×重さの相関関係から割り出す単位を使用します。デンテックスは糸の長さ10,000mに対して糸の重さ1gを1デンテックスと呼びます。

商品名	容量	入数	メーカー希望患者様向け価格/個
DENT.e-floss	40m	12個 (ピンク ×3個 オレンジ×3個 ブルー ×3個 クリア ×3個)	380円

※価格には消費税は含まれておりません。